

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР

Инструкция по использованию



## **Уважаемый покупатель,**

поздравляем Вас с выбором. Наши продукты разрабатываются и производятся так, чтобы они полностью удовлетворяли ожидания наших самых требовательных клиентов в течение длительного времени использования приборов. Вы можете спокойно пользоваться техникой, поскольку она соответствует самым строгим стандартам качества и безопасности.

Прибор соответствует требованиям Директивы ЕС по электромагнитной совместимости 89/336 / ЕСС и Директивы ЕС по низковольтному оборудованию 73/23 / ЕСС.

### **1. Инструкция по технике безопасности**

- Перед использованием прибора полностью прочтите эту инструкцию.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования, не для профессионального. Использование его любым способом, который отличается от указанного в инструкции, может быть опасно. Не используйте массажер в качестве замены необходимой Вам медицинской помощи.
- Всегда храните прибор и его упаковку в недоступном для детей и инвалидов месте. Также будьте предельно осторожны, когда Вы используете его в их присутствии.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции о том, как пользоваться прибором от человека, несущего ответственность за их безопасность.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте прибор. Если возникла какая-либо проблема со шнуром или любой другой частью устройства, не используйте массажер и отнесите его в авторизованный сервисный центр.
- Если шнур питания прибора поврежден, он должен быть заменен производителем в сервисной службе или специалистом с соответствующей квалификацией, чтобы предотвратить возможные связанные с этим опасные ситуации.
- Не используйте детали или аксессуары, не поставляемые или не рекомендованные нами.
- Перед тем, как подключить прибор к электросети, убедитесь, что указанное напряжение соответствует номинальному напряжению в Вашем доме.

## Правила техники безопасности

- Всегда отключайте прибор от сети после использования, а также перед снятием или установкой деталей, перед выполнением любых работ по обслуживанию или очистке. Также отключайте прибор при отключении электроэнергии. Когда Вы подключаете или отключаете прибор от сети, он должен быть выключен
- Не тяните за шнур питания и не подвешивайте прибор за шнур. Всегда отключайте прибор от сети, потянув за вилку, не поворачивая шнур.
- Не используйте прибор рядом с ваннами, раковинами, душевыми кабинами или другими резервуарами, содержащими воду. Если он упал в воду, не пытайтесь поднять его. Немедленно отключите прибор от сети.
- Никогда не погружайте основной корпус прибора в воду или другую жидкость и не кладите его в посудомоечную машину. Во время очистки прибор не должен контактировать с водой.
- Никогда не оставляйте прибор на улице.
- Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми руками.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не используйте его, принимая ванну или душ. Избегайте попадания воды на прибор или шнур питания.
- Никогда не оставляйте работающий прибор на влажной поверхности или на ткани.

## ВАЖНО

Если Вы хотите утилизировать массажер, НИКОГДА не выбрасывайте его в мусорное ведро. Отнесите его в ближайший к Вашему дому центр сбора мусора для обработки. Так Вы позаботитесь об окружающей среде.



## 2. Описание

Основные части прибора.

1. Основной корпус.
2. Выкл. / Массаж / массаж + ИК-переключатель
3. Регулировка интенсивности массажа.
4. Передатчик инфракрасного излучения.
5. Адаптер массажной насадки.
6. Шнур.
7. Пальчиковая массажная насадка.
8. Роликовая массажная насадка.
9. Шариковая массажная насадка.
10. Волнообразная насадка.
11. Тканевая накладка.





## Электрические характеристики

Напряжение питания зарядного устройства: 220-240 В, 50 Гц, 25 Вт/

## Описание

Профессиональная система моделирования.

Эффективно борется с целлюлитом и дряблостью кожи в домашних условиях.

Прибор создан на основе профессиональных методов массажа. Эта модель массажера последнего поколения делает эффективный лечебный массаж в домашних условиях и особенно подходит для тех, кто страдает целлюлитом, задержкой жидкости в организме и дряблостью кожи.

Его эффективность заключается в мощном двигателе, который производит одновременные вращательные и вибрационные движения. Это сложное движение производит подкожный массаж, который увеличивает кровоток, стимулирует лимфодренаж и кровообращение, улучшает эластичность кожи.

Прибор обеспечивает эффективный массаж, усиленный воздействием инфракрасного излучения, перемещает, нагревает и выводит жировую ткань, а также разглаживает неровную «апельсиновую корку».

Аппарат применяет в работе движения трения и разминания, копируя движения рук массажиста в профессиональном лечебном массаже.

Прибор эргономично разработан для удобного домашнего использования, это позволяет Вам делать себе массаж в любое время и в любом месте.

Для эффективных результатов мы рекомендуем использовать массажер в течение 15 минут каждый день. Его можно использовать со специальными лечебными кремами (укрепляющими или антицеллюлитными)



### **3. Общие рекомендации по применению.**

1. Массажруйте одну область максимум пять минут. Используйте свою чувствительность как ориентир для определения продолжительности массажа.
2. Используйте массажную головку, которая подходит именно для Ваших целей.

#### **Пальчиковая массажная насадка (7)**

Данная насадка имитирует профессиональный массаж пальцами. Подходит для лечения болезненного целлюлита, рефлексотерапии стоп (массаж стоп) и мягкого массажа мышц.

#### **Использование роликовой массажной насадки (8)**

Эта насадка сразу дает видимые результаты. Она устраняет целлюлит, работает против дряблости кожи, стимулирует кровоток, тонизирует мышцы, выполняет лимфодренаж, уменьшает объем, снимает боли в спине, радикулит и люмбаго, разогревает мышцы, расслабляет, снимает стресс и т. д.

#### **Использование шариковой массажной насадки (9)**

Подходит для деликатных участков, таких как лицо, грудная клетка, шея и грудь. Активизирует и укрепляет мышцы, помогая укрепить кожу, придавая ей более упругий и гладкий вид. Улучшает кровообращение в области живота, выводит локальные токсины и улучшает работу кишечного тракта, предотвращая запоры.

#### **Использование волнообразной насадки (10)**

Имитирует профессиональный массаж ладонью, тонизирующий и улучшающий кровоток. Предназначена для использования в области бедер и ягодиц.

#### **Использование тканевой накладки для защиты насадки (11).**

Для большего комфорта накройте выбранную насадку тканевой накладкой.

Этот аксессуар нельзя использовать с кремами.

Тканевую накладку (11) можно использовать только с волнообразной насадкой (10). Использование ее с другими насадками может повредить ткань, и массаж будет менее эффективным.

Контроль интенсивности позволяет регулировать силу массажа по мере необходимости.

Использование низкого по интенсивности режима подходит для лечения на деликатных участках (лицо, шея, грудь, ноги с варикозным расширением вен) или для беременных женщин. Используйте максимальный по интенсивности режим для лечения менее чувствительных участков тела.

#### **4. Правила использования**

Данный прибор создан для лечебного антицеллюлитного массажа, а также для массажа от задержки жидкости в организме и для избавления от дряблости кожи. Не используйте его для других целей.

Спросите своего врача, есть ли у Вас какие-либо проблемы со здоровьем, например, у Вас стоит кардиостимулятор.

Не используйте массажер на голой коже, если у Вас есть сыпь или воспаление.

Не используйте прибор перед сном. Массаж может оказать стимулирующий эффект, и Вам трудно будет уснуть.

Не пользуйтесь массажером, лежа в постели.

Массажер также разогревает кожу за счет функции подогрева. Люди, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании устройства.

Защищайте глаза от воздействия инфракрасного излучения.

Чрезмерное инфракрасное излучение может быть вредным, поэтому избегайте длительного воздействия инфракрасных лучей.




## Использование

Не используйте прибор более 15 минут. Продолжительное использование прибора более 15 минут может привести к его перегреву и, соответственно, сокращению срока службы. Дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.

1. Включите прибор в розетку.
2. Установите переключатель (2) в положение (B / массаж) или положение (C / массаж + инфракрасное излучение (IR)), в зависимости от требуемого лечения.
3. Установите соответствующую насадку (7), (8), (9) или (10) для необходимого воздействия на адаптере головки (5).
4. При желании наденьте тканевую накладку для защиты на лечебную насадку (11).
5. Установите интенсивность массажа с помощью регулятора (3) в соответствии с областью, над которой Вы собираетесь работать, и ее чувствительности к массажу. Для этого поверните регулятор пальцем в ту или иную сторону в соответствии с желаемой настройкой интенсивности.
6. Когда Вы закончите пользоваться массажером, установите переключатель (2) в положение (A / off).
7. Отключите прибор от электросети.

Чтобы выполнить массаж с желаемым эффектом в каждой области и для каждой процедуры, следуйте инструкциям на рисунке 3 в отношении того, какую насадку использовать, направление массажа и положение переключателя (2) (B или C / массаж или массаж + ИК).

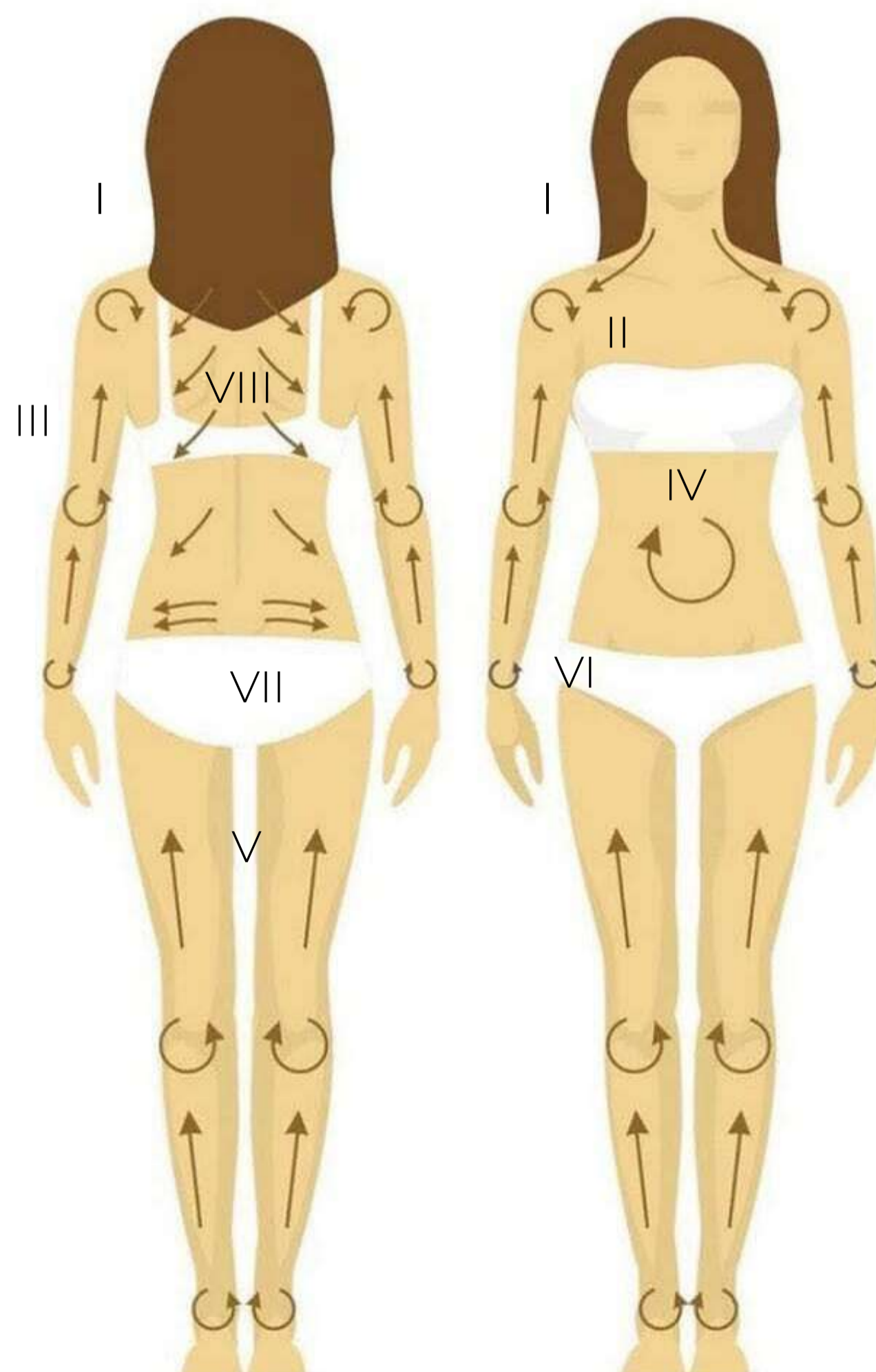

## 5. Очищение и хранение прибора.

Не используйте растворители, моющие средства или абразивные средства для очищения прибора.

1. Отключите прибор от сети.

2. Используйте сухую ткань, чтобы очистить прибор снаружи.

### Хранение

- Когда прибор не используется, отключите его от сети и храните в сухом, прохладном месте.
- Во избежание повреждения кабеля не скручивайте его, не тяните и не наматывайте вокруг прибора. Если он поврежден, немедленно замените его у квалифицированного специалиста.

Прибор рассчитан на ток: 110-240 В

---

**ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ**

---